



МЕТОДИКИ
ПЛОМБИРОВАНИЯ
КОРНЕВОГО КАНАЛА

GOFFSHTEIN
D E N T A L D E V E L O P M E N T


Латеральная компакция Горячим методом/ по Соломонову (гибридная методика)

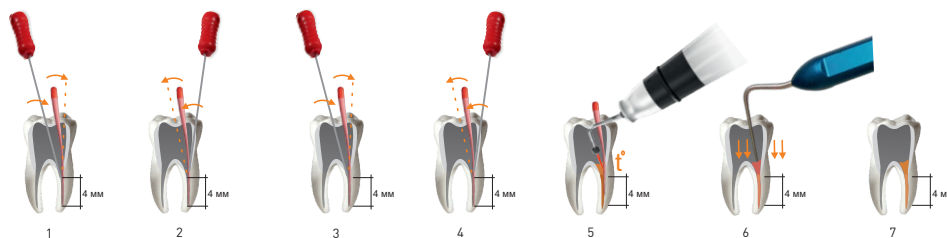

- 1 - 4. Апикальная треть канала - классическая латеральная компакция
5. Торчащие из канала «хвосты» гуттаперчи разогреть с помощью GuttaEst
- 6 - 7. Холодным плаггером SSG (размер 3-4) вертикально запаковать разогретыми «хвостами» штифтов оставшиеся 2/3 части канала

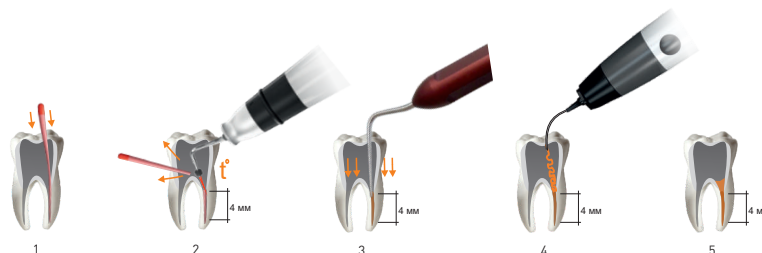

1. Мастер-штифт (тот же размер и конус, что последний файл) припасовать в апикальной трети канала
2. Обрезать с помощью GuttaEst02 (насадка S/M) верхнюю часть гуттаперчевых штифтов и извлечь их
3. Холодным плаггером SSG (размер 1-2) вертикальная компакция оставшейся части штифта в апикальной трети канала - создание апикальной пробки
- 4 - 5. Оставшиеся 2/3 канала заполнить порционно из инжектора GuttaFill02

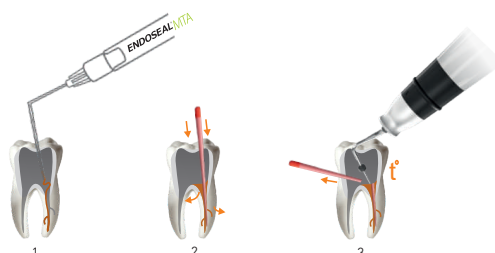

1. Наносим на стенки канала зуба пасту MTA
2. Обильно наносим пасту также на мастер-штифт. Вводим мастер-штифт в корневой канал, одновременно «раздавливая» пасту MTA латерально к стенкам канала зуба, тем самым заводя пасту в перфорацию и латеральные канальца
3. Обрезаем кончик мастер-штифта горячим плаггером

Пломбирование канала с одновременным закрытием перфорации




- 1 - 2. Сформировать апикальный уступ на этапе механической обработки канала и заполнить весь канал от апекса до устья с помощью GuttaFill02

**! Рекомендованно для
эндодонтистов продвинутого
уровня**

Инъекционная методика

ЗАПОЛНЕНИЕ ШАХТЫ АББАТМЕНТА Методика для ортопедов

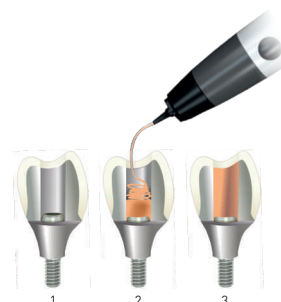

- скорость запечатывания шахты аббатмента
- экономия: расход гуттаперчи на одну шахту 5-7 рублей (*при стоимости 1 стержня 27 рублей)
- легкость извлечение, то есть одним куском