

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Инструмент ручной эндодонтический SSG Plugger
по ТУ 32.50.11-025-56755207-2019
РУ 2020/9715 от 07 февраля 2024 года

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Инструмент ручной эндодонтический SSG Plugger предназначен для эндодонтического лечения осложненного кариеса и пломбирования корневых каналов методом вертикальной конденсации (уплотнения) разогретой гуттаперчи в корневом канале.

Область применения: стоматологические учреждения и клиники.

Инструмент для профессионального применения, используются только в условиях клиники, специально подготовленными специалистами.

2. КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструмент предназначен для многократного применения.

3. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показания к применению:

- кариес;
- пульпит;
- любая дентальная боль.

Противопоказания к применению:

- вертикальный перелом зубного корня;
- инструмент содержит нержавеющую сталь, никель, силикон, не применять в лечении при известных аллергических реакциях у пациента.
- не применять в случае резкого искривления апикальной части корневого канала зуба.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание попадания инфекции, простерилизуйте инструмент в автоклаве. Стерилизацию необходимо завершить до начала манипуляций с использованием инструмента.
- Перед тем, как начать выполнять манипуляции в полости зуба, проверьте инструмент на предмет искривлений, царапин и трещин. В случае повреждения инструмента, его следует утилизировать.
- Не используйте паровой стерилизатор с высоким давлением, который нагревается до температуры более 200 градусов, в т. ч. в течение процесса сушки.
- Во время выполнения очистки медицинским очищающим средством необходимо строго соблюдать инструкцию производителя такого средства.

ВАЖНО! При процедурах дезинфекции инструмента:

Запрещается использовать щелочные растворы, превышающие показатель pH выше 7 единиц (pH воды - это показатель, который указывает на уровень кислотности или щёлочности водного раствора. Он измеряется по шкале от 0 до 14, где 7 считается нейтральным значением. Значения ниже 7 указывают на кислотную среду, а выше 7 на щелочную).

При несоблюдении рекомендаций Производитель не несет ответственности за целостность инструмента.




рабочие части стержня инструмента градуированы насечками на расстоянии 0,5, 1, 1,5, 2 мм от вершины инструмента для удобства определения длины его погружения в корневой канал

цветовая и тактильная индикация размера (для врачей, работающих с микроскопом)

5 размеров, включая #0, плюс наконечник NiTi


МЕТОДИКИ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА

Латеральная компакция Горячим методом/ по Соломонову (гибридная методика)

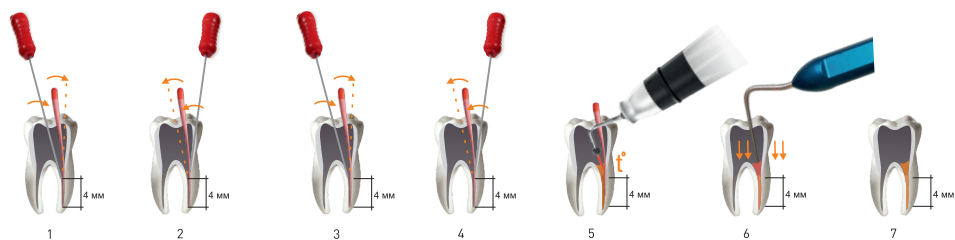


- 1 - 4. Апикальная треть канала - классическая латеральная компакция
5. Торчащие из канала «хвосты» гуттаперчи разогреть с помощью GuttaEst
- 6 - 7. Холодным плаггером SSG (размер 3-4) вертикально запаковать разогретыми «хвостами» штифтов оставшиеся 2/3 части канала

Вертикальная компакция методом непрерывной волны

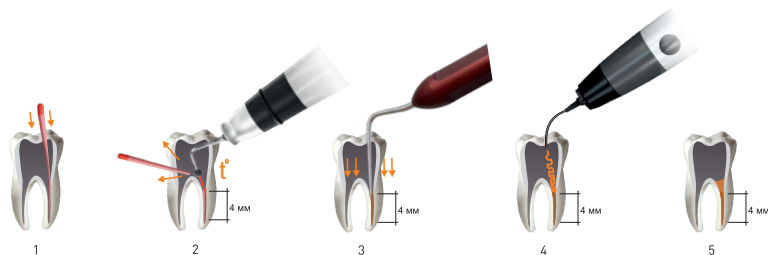

1. Мастер-штифт (тот же размер и конус, что последний файл) припасовать в апикальной трети канала
2. Обрезать с помощью GuttaEst02 (насадка S/M) верхнюю часть гуттаперчевых штифтов и извлечь их
3. Холодным плаггером SSG (размер 1-2) вертикальная компакция оставшейся части штифта в апикальной трети канала - создание апикальной пробки
- 4 - 5. Оставшиеся 2/3 канала заполнить порционно из инжектора GuttaFill02

Пломбирование канала с одновременным закрытием перфорации

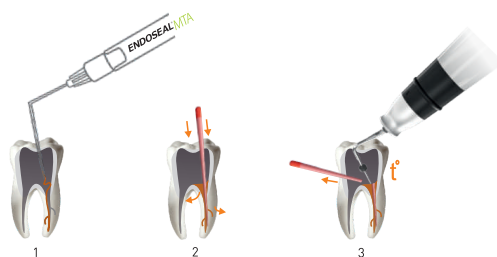

1. Наносим на стенки канала зуба пасту МТА
2. Обильно наносим пасту также на мастер-штифт. Вводим мастер-штифт в корневой канал, одновременно «раздавливая» пасту МТА латерально к стенкам канала зуба, тем самым заводя пасту в перфорацию и латеральные канальца
3. Обрезаем кончик мастер-штифта горячим плаггером


Инъекционная методика



- 1 - 2. Сформировать апикальный уступ на этапе механической обработки канала и заполнить весь канал от апекса до устья с помощью GuttaFill02

**! Рекомендованно для
эндодонтистов продвинутого
уровня**

ЗАПОЛНЕНИЕ ШАХТЫ АББАТМЕНТА Методика для ортопедов

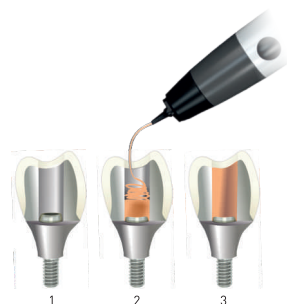

- скорость запечатывания шахты аббатмента
- экономия: расход гуттаперчи на одну шахту 5-7 рублей (*при стоимости 1 стержня 27 рублей)
- легкость извлечение, то есть одним куском