

STOMTECH PRO

клинические рекомендации



STOMTECH PRO – революция в профессиональной гигиене полости рта


STOMTECH PRO ULTRA – это непревзойденная деликатность воздействия на поверхность зубов, возможная благодаря самой низкой абразивности порошка на рынке стоматологических порошков для профессиональной гигиены полости рта.

- Поверхность зубов будет предсказуемо заполирована, а не поцарапана.
- Процедура пройдет безболезненно для пациента.


Благодаря оптимальной фракции частиц, порошок обеспечивает:

- Бережное удаление налёта и пигментации без повреждения эмали и дентина
- Эффективную полировку поверхности зубов за счёт сбалансированного состава
- Минимальный дискомфорт для пациента – сниженная абразивность по сравнению с классическими порошками


STOMTECH.PRO ULTRA / ПРИМЕНЕНИЕ

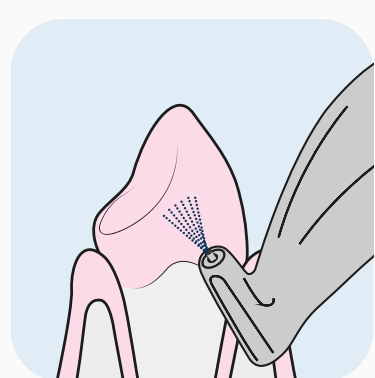


Над цементно-эмалевым
соединением

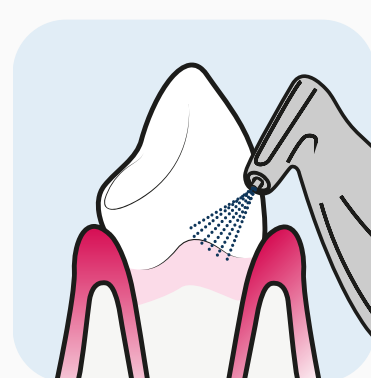

Поддесневые
поверхности

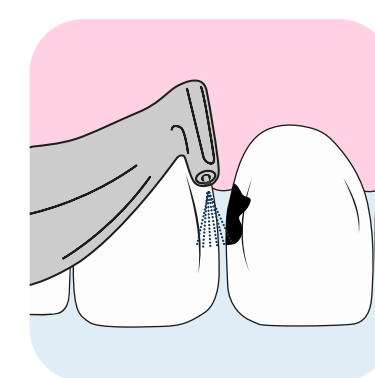


Перед
раставрациями

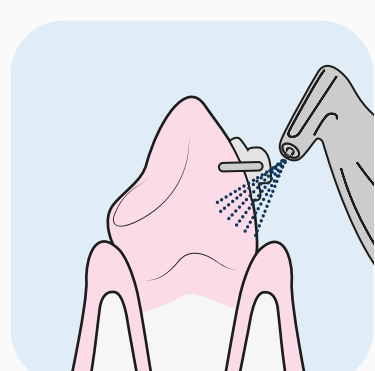


На брекетах




Вокруг
имплантов

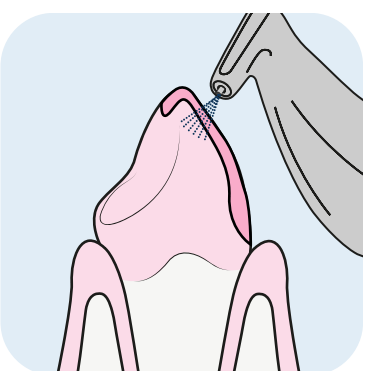

На реставрациях

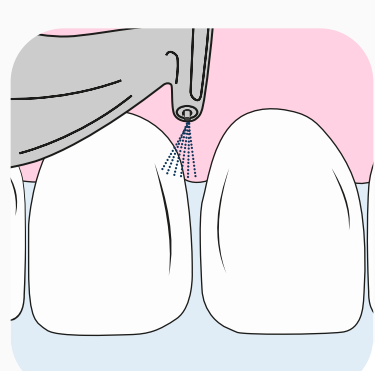

Интердентально

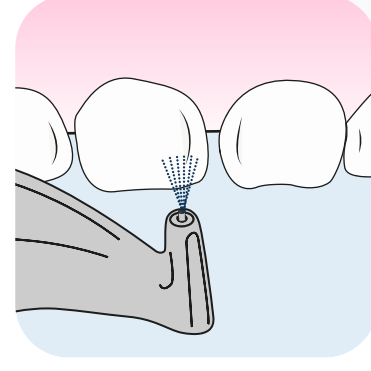

На молочных зубах

STOMTECH PRO

Отлично

подходит для профессиональной
чистки наддесневых
поверхностей детских зубов

Эффективно

удаляет слабоминерализованные
зубные отложения

Идеально

для чувствительных зубов

на 35%

меньше гранулы чем у аналогов



НАША ЦЕЛЬ



Сохранение здоровых зубов

STOMTECH.PRO позволяет свести до минимума использование ручных инструментов. Минимальная инвазивность для всех типов поверхности зуба: дентина, цемента, эмали и дёсен.


Минимальное механическое повреждение для максимального комфорта, что позволяет пациенту сохранить здоровые зубы гораздо дольше, а также увеличить промежутки между гигиенами, так как поверхность зубов дольше остается чистой.



Уход за ортодонтическими конструкциями

Ортодонтические конструкции способствуют росту биопленки в местах недоступных для зубной щётки при традиционной профилактике, что способствует подвижности дуги, гингивита и кариеса.

STOMTECH.PRO удаляет биопленку обеспечивая полный доступ к критическим участкам. Являясь безопасным и эффективным для зубов и брекетов, процедура позволяет предотвратить кариес и гиперплазию.

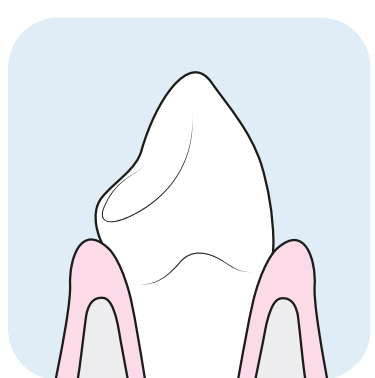

Профилактика кариеса

Биопленка не всегда видна невооружённым глазом. Индикация биоплёнки позволяет удалить её полностью.

STOMTECH.PRO предотвращает появление кариеса и болезни дёсен у детей и взрослых. Нет биоплёнки = нет кариеса.



Лечение при оголении дентина

После проведения индикации удалите биоплёнку на дентине с помощью порошка STOMTECH.PRO. Прекратите процедуру после обработки всех окрашенных участков. Это единственная методика, гарантирующая минимальную инвазивность при прямом визуальном контроле.

Порошок STOMTECH.PRO в комбинации с теплой водой обеспечивает максимальный комфорт и минимальную чувствительность.



Сохранение здоровых мягких тканей

Проверено, что порошок STOMTECH.PRO щадяще воздействует на поверхность десны и другие мягкие ткани, тогда как ручные и ротационные инструменты могут их повредить.



Диагностика начального кариеса


Кариес зачастую развивается в местах недоступных для резиновых чашечек и циркулярных щёточек (контактные поверхности зубов, фуркации корней зубов и фиссуры).

STOMTECH.PRO эффективно очищает их, обеспечивает более точную раннюю диагностику кариеса на чистых поверхностях, а также подготавливает зуб для аппликации фторсодержащих препаратов.



Защита имплантата


Профессиональная гигиена с использованием порошка STOMTECH.PRO позволяет бережно и эффективно очищать область вокруг имплантата — особенно в зоне слизистого кармана. Это способствует устранению биоплёнки и воспаления, улучшает микроциркуляцию и создаёт оптимальные условия для заживления тканей.

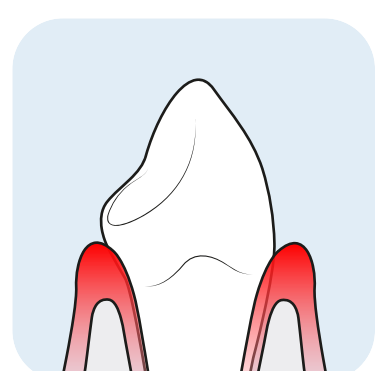

Лечение гингивита

Порошок STOMTECH.PRO позволяет легко и безопасно удалить биоплёнку и слабоминерализованные зубные отложения с поверхности зубов. Это снижает бактериальную нагрузку и устраняет основные причины воспаления.

А главное — чистая поверхность зуба означает отсутствие травмирующего воздействия твёрдых отложений на десну. Чем меньше налёта и камней — тем меньше раздражения, отёка и кровоточивости.

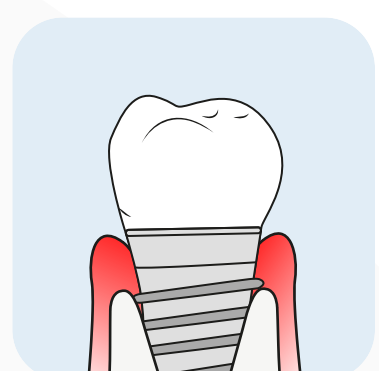

Лечение мукозита

STOMTECH.PRO безопасно проникает в мельчайшие неровности на поверхности имплантатов и очищает их, обеспечивая оптимальное удаление биопленки и мягкое воздействие на окружающие имплантат ткани.

STOMTECH.PRO — это передовой подход к уходу за имплантатами.



Лечение пародонтита

STOMTECH.PRO с порошком PERIO позволяет максимально сохранить структуру цемента во время поддерживающей пародонтальной терапии.

Он эффективно удаляет поддесневую биопленку в остаточных глубоких карманах и зубной камень минимально инвазивным образом. Финальное контрольное обследование подтверждает отсутствие остаточного зубного камня.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

STOMTECH PRO **ULTRA** 14 мкм

Основные характеристики:

- Размер частиц: 14 микрон
- Назначение: сверхделикатная чистка

Преимущества:

- Безопасен для эмали и дёсен
- Подходит для пациентов с повышенной чувствительностью
- Идеален для детей и профилактических чисток

Совместимость:

- Совместим с наконечниками и насадками PERIO



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

1. Диагностика и оценка состояния полости рта

- Визуальный осмотр с помощью зеркала и зонда
- Окрашивание биопленки для визуализации налета
- Оценка состояния десен (индексы CPI, BOP, PSR)

2. Мотивация и информирование пациента

- Объяснение необходимости процедуры
- Демонстрация зон скопления биопленки с помощью окрашивания
- Фотопротокол

3. Удаление наддесневого и поддесневого налета, биопленки и поверхностной пигментации с помощью стоматологического порошка **STOMTECH PRO ULTRA**

4. Удаление зубного камня ультразвуком

*Оценка состояния дёсен (индексы CPI, BOP, PSR)

CPI (Community Periodontal Index) — индекс, отражающий наличие зубного камня, карманов и кровоточивости;

BOP (Bleeding on Probing) — индекс кровоточивости при зондировании, указывающий на воспаление дёсен;

PSR (Periodontal Screening and Recording) — скрининговый индекс для быстрой оценки пародонтального статуса и выявления необходимости лечения. < /small >



5. Полировка и рем-терапия

- Повторная обработка поверхности зубов порошком производится с целью полировки
- Аппликация реминерализующими лекарственными средствами по показаниям

6. Контроль качества и рекомендации

- Индивидуальные рекомендации по уходу (подбор щетки, пасты, ирригатора)
- Назначение следующего визита (интервал 3–6 месяцев)

Этот протокол соответствует современным стандартам профилактической стоматологии и рекомендован для использования в клиниках премиум-класса.



STOMTECH PRO

Удаляет не только биопленку, но и налёт, а также пигментацию



STOMTECH PRO


Это максимально комфорт для маленьких пациентов, отсутствие боли и согласие на повторные визиты



STOMTECH PRO

это желание не зависеть от поставок и непредсказуемых цен на материалы. Желание давать пациентам высокий уровень услуг изо дня в день.

С уважением, команда STOMTECH PRO

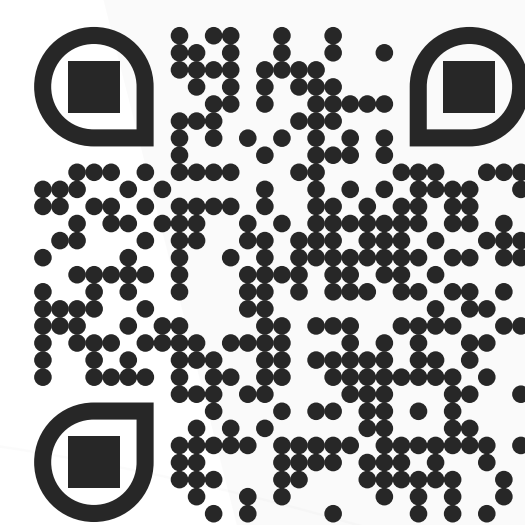

<https://stomtech.pro/>

+7 (930) 766 99 88

info@stomtech.pro

305022, Курская Область, г Курск, ул Соловьиная,
зд. 51, офис 16



STOMTECH PRO

Сделано с заботой в России

ДЛЯ ЗАМЕТОК: